



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ(титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2006104099/22, 13.02.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
13.02.2006

(45) Опубликовано: 27.05.2006 Бюл. № 15

Адрес для переписки:  
125367, Москва, Волоколамское ш., 56,  
корп.1, кв.68, С.В. Москвину


(72) Автор(ы):  
Москвин Сергей Владимирович (RU)

(73) Патентообладатель(и):  
Москвин Сергей Владимирович (RU)

(54) ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРЕДСТАТЕЛЬНУЮ ЖЕЛЕЗУ

(57) Формула полезной модели

Лазерный терапевтический аппарат для воздействия на предстательную железу, содержащий систему управления и излучающую ректальную насадку с лазерным диодом и кольцевым магнитом, отличающийся тем, что излучающая ректальная насадка выполнена в виде вибромагнитолазерной головки с возможностью одновременного воздействия вибрацией, лазерным излучением и магнитным полем, причем указанная вибромагнитолазерная головка содержит корпус и рабочую часть, соединенные друг с другом посредством трубы, в полости которой размещены тросик и гибкий световод, в корпусе размещены двигатель для вращения тросика и лазерный диод с платой питания, а рабочая часть содержит соединенный с тросиком эксцентрик и, по меньшей мере, два кольцевых магнита, между которыми размещен рассеиватель лазерного излучения.

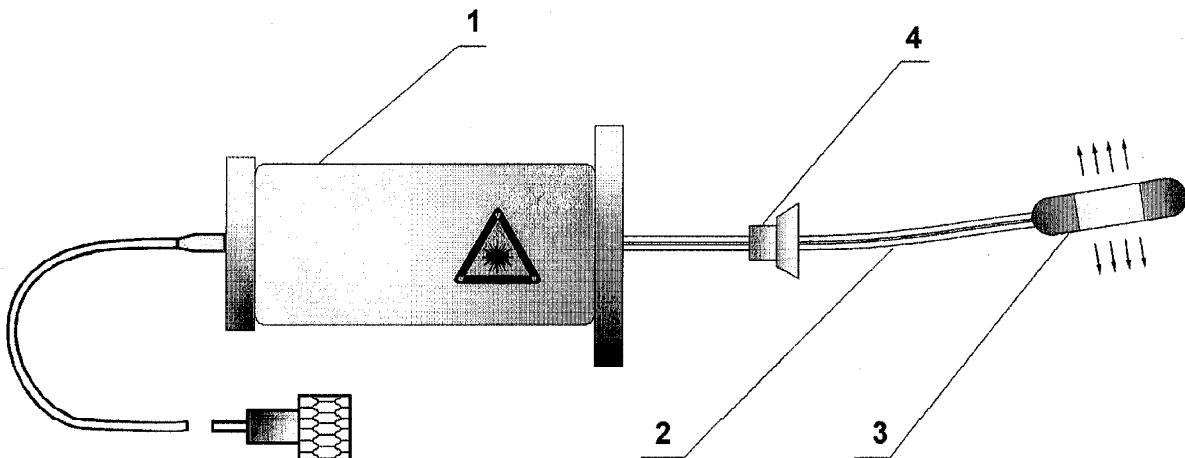

R U 1 5 3 5 7 5 U 1