



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

**(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ(титульный лист)**

(21), (22) Заявка: 2005140310/22, 23.12.2005

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
23.12.2005

(45) Опубликовано: 10.04.2006 Бюл. № 10

Адрес для переписки:  
125367, Москва, Волоколамское ш., 56,  
корп.1, кв.68, С.В. Москвину

(72) Автор(ы):  
Москвин Сергей Владимирович (RU)

(73) Патентообладатель(и):  
Москвин Сергей Владимирович (RU)

**(54) ЛАЗЕРНАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ ГОЛОВКА**

**(57) Формула полезной модели**


Лазерная излучающая головка, содержащая цилиндрический корпус с размещенным внутри него диодным лазером, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит электронную схему, адаптированную под стандартное электрическое напряжение, при этом рабочая торцевая часть корпуса содержит открытую с рабочего торца цилиндрическую полость, на внутренней боковой поверхности которой выполнена гостированная метрическая резьба M24x1 для подсоединения оптической насадки, в указанной полости соосно с ней размещен диодный лазер цилиндрической формы таким образом, что внешняя поверхность плоского выходного окна диодного лазера находится в одной плоскости с рабочим торцом цилиндрического корпуса головки.

1  
U

9  
6  
5  
2

R  
U

R  
U  
5  
2  
5  
6  
9  
U  
1

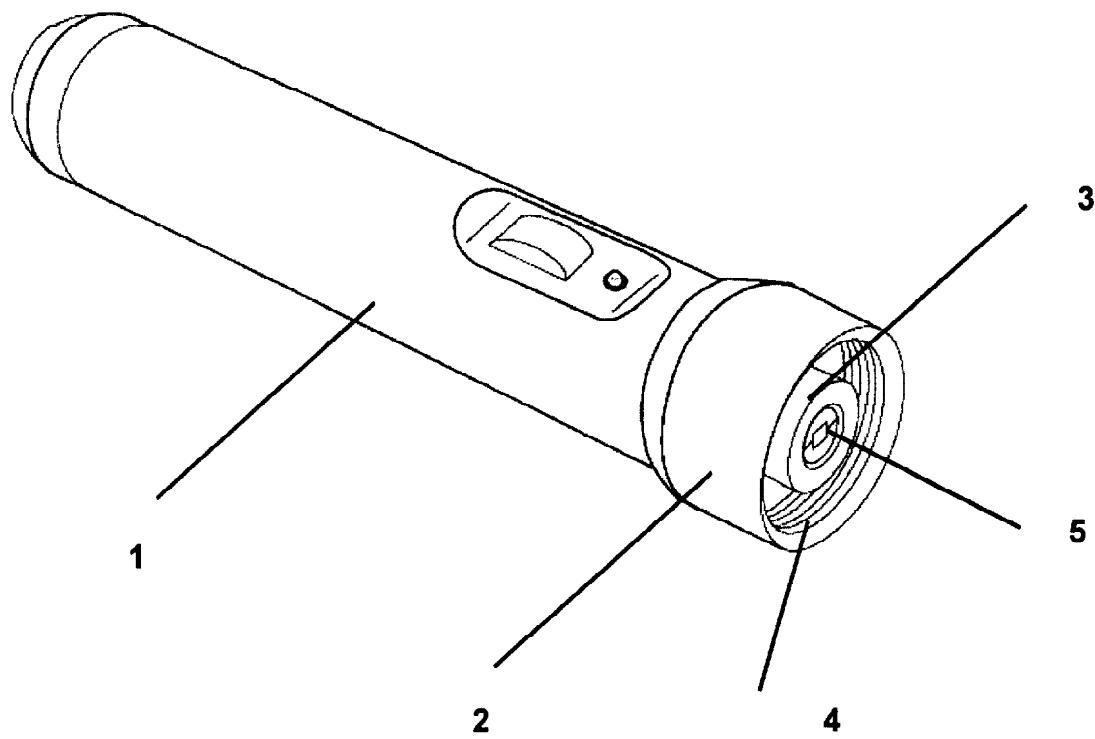

R U      5 2 5 6 9      U 1

R U      5 2 5 6 9      U 1